
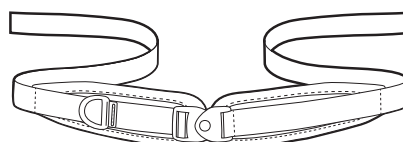


Ceinture de soutien pelvien

INSTALLATION ET CONSIGNES UTILISATEUR

ART NOS. GB2, HB2, HB4, LB2, LB4 ET NB2

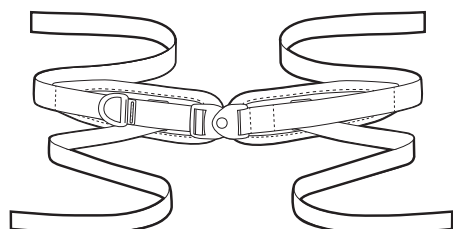

Ces consignes fournissent des renseignements importants quant à la sécurité et l'entretien de toutes les ceintures de soutien pelvien Bodypoint. Remettre ces consignes à l'utilisateur ou à son soignant et les passer en revue avec eux pour vérifier qu'elles sont bien comprises.

⚠ ATTENTION ! Ce produit doit être installé et ajusté par un technicien qualifié en réadaptation.

Pour son installation, ce produit doit être monté avec un des éléments suivants :

- Des embouts de montage plats
- Des embouts de montage en angle
- Des boucles à came (1" pour les utilisateurs pesant jusqu'à 75 kg, 1-1/2" et 2" adapté à tous les utilisateurs)

Des fixations optionnelles de ceinture Bodypoint peuvent aussi être utilisées pour le montage sur les fauteuils roulants et les systèmes de sièges.

UTILISATION :

⚠ ATTENTION ! Ce produit doit servir uniquement à placer une personne dans un fauteuil roulant ou un fauteuil de travail. Il n'est PAS prévu pour servir de ceinture de sûreté de transport ou de dispositif personnel de retenue, ou pour toute autre application où sa défaillance pourrait causer un préjudice corporel. Une mauvaise utilisation de ce produit est interdite et dangereuse.

⚠ ATTENTION ! Cette ceinture de soutien pelvien doit être bien ajustée le long du pelvis ou des cuisses à tout moment. Demandez à votre spécialiste de faire une démonstration du réglage et de l'utilisation.

- Une ceinture lâche comporte un risque pour l'utilisateur qui peut glisser dans l'ouverture et s'étrangler.
- L'ouverture accidentelle de la ceinture de soutien pelvien comporte un risque pour l'utilisateur qui peut glisser et tomber du fauteuil roulant.
- L'impossibilité pour l'utilisateur de se libérer tout seul peut présenter un risque si l'utilisateur glisse ou est immobilisé dans le fauteuil en cas d'urgence.

Si les capacités physiques ou cognitives de l'utilisateur l'empêchent d'utiliser cette ceinture en toute sécurité, un membre du personnel soignant doit être présent à tout moment pendant son usage. S'assurer que tout le personnel soignant sait comment serrer et détacher correctement le produit.

⚠ ATTENTION ! Comme tous les nouveaux supports d'assise, ce produit peut modifier la manière de s'asseoir de la personne. Les utilisateurs doivent continuer à effectuer régulièrement des activités de décompression et des contrôles d'intégrité de la peau non seulement aux endroits où ce produit entre en contact avec l'utilisateur, mais aussi sur les zones principales où une pression est exercée, telles que le sacrum, les jambes et les fesses. En cas de rougeurs ou d'irritation de la peau, cesser l'emploi et consulter le médecin ou un spécialiste de l'appui d'assise. Le non respect de cette précaution pourrait entraîner de graves blessures, telles que des ulcères de pression.

CONTRÔLES PÉRIODIQUES DE SÉCURITÉ ET DE PERFORMANCE : Pour assurer la sécurité de l'utilisateur, ce produit doit être régulièrement contrôlé au niveau du fonctionnement et de signes éventuels d'usure. Si le produit ne fonctionne pas correctement ou en présence d'une usure importante au niveau des boucles, points de montage, sangles, rembourrages ou coutures, cesser de l'utiliser et contacter le fournisseur pour obtenir une réparation par du personnel qualifié ou un remplacement par Bodypoint. Ne jamais confier la modification ou la réparation de ce dispositif à un personnel non qualifié - il en va de la santé et de la sécurité de l'utilisateur !



NETTOYAGE : Lavage en machine à 60°C (140°F). Ne pas blanchir. Séchage à la machine à basse température, ou bien étendre et égoutter. Ne pas repasser. (Pour éviter de rayer le produit et la machine, placer le produit dans un sac en toile lors du lavage.)

GARANTIE : Ce produit est couvert par une garantie à vie limitée contre les défauts d'exécution et de matériaux survenant dans le cadre d'une utilisation normale par le consommateur d'origine. Contacter le fournisseur ou Bodypoint pour toute réclamation de garantie.

Pour plus d'information sur les produits Bodypoint, ou pour consulter la liste des distributeurs en dehors des États-Unis, rendez-vous sur www.bodypoint.com.


 **Bodypoint**®

EC REP

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover
Allemagne


CE

558 First Ave. S., Suite 300 | Seattle, WA 98104 | 206.405.4555 | 800.547.5716 | www.bodypoint.com

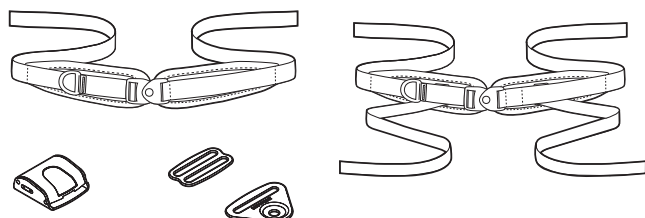


CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Ceinture de soutien pelvien à deux points ou quatre points
- Boucles Cinch-Mount™ ou Flat-Mount™ (en option)
- Fixations FrameSaver™ (en option)

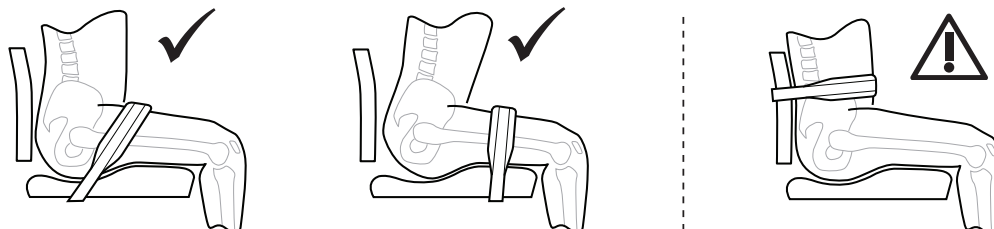


INSTALLATION : CEINTURES DE SOUTIEN PELVIEN À DEUX POINTS

1. En fonction des objectifs cliniques, déterminer la position et l'angle le plus efficace pour la ceinture. Déterminer s'il vaut mieux placer la sangle de serrage sur le côté gauche ou droit pour l'utilisateur.
2. Localiser les points de montage souhaités sur le système de siège ou le cadre du fauteuil roulant.
3. Fixer les sangles à la base rigide du siège ou au cadre du fauteuil roulant en utilisant, si nécessaire, le matériel démontage pour sangle Bodypoint en option.
4. Centrer la ceinture sur l'utilisateur, faire passer les extrémités des sangles dans les boucles et régler à la longueur souhaitée.
5. Serrer la ceinture jusqu'à ce qu'elle maintienne bien l'utilisateur.

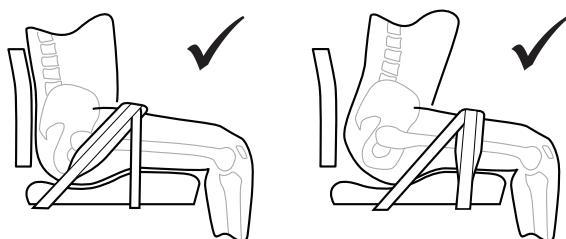


INSTALLATION : CEINTURES DE SOUTIEN PELVIEN À QUATRE POINTS

1. Suivre les instructions d'installation ci-dessus pour installer et ajuster la ceinture de manière à stabiliser et positionner l'utilisateur.
2. Attacher les sangles secondaires au fauteuil roulant pour éviter que la ceinture se déplace.

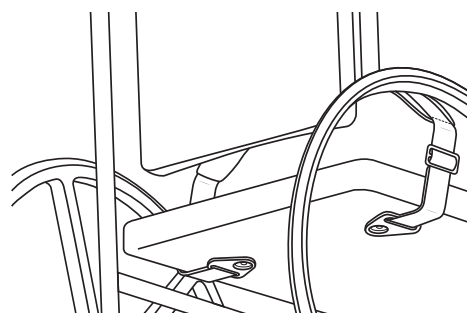

OPTION MONTAGE DIRECT


Les raccords peuvent être attachés directement aux surfaces solides du siège. Les vis de montage doivent avoir une résistance à l'arrachement d'au moins 90 kg/200 livres. (Non incluses.)

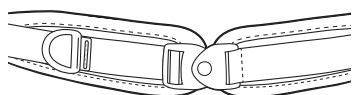

RÉGLAGE

Une fois bien réglée et serrée, la ceinture doit bien s'ajuster au corps de l'utilisateur sans présenter de jeu de manière à ce que l'utilisateur soit en sécurité.

Utiliser la sangle de serrage pour les réglages quotidiens, par exemple pour l'adapter après un changement de vêtements. S'il est nécessaire d'allonger la ceinture pour obtenir un meilleur ajustement ou de l'enlever pour la nettoyer, il convient d'utiliser les boucles de la ceinture.

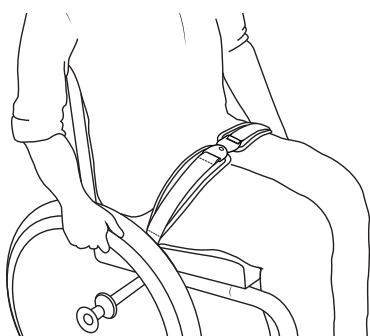

CONTRÔLE DE SÉCURITÉ

Demander à l'utilisateur, correctement installé dans son fauteuil roulant, de se pencher en avant et latéralement d'un côté et de l'autre pour vérifier l'ajustage. Contrôler les points suivants :

1. Bon fonctionnement des boucles et des sangles de réglage.
2. Confort – Rechercher des zones d'irritation éventuelle.
3. Position – Si trop haut ou trop bas, régler les points de montage.
4. Faire décrire au fauteuil toute sa gamme de mouvements : incliner, replier et rouler. Vérifier s'il y a des interférences et modifier les points de montage selon les besoins.