
Rallonge de **Ceinture Evoflex**

ART NO. EBE100

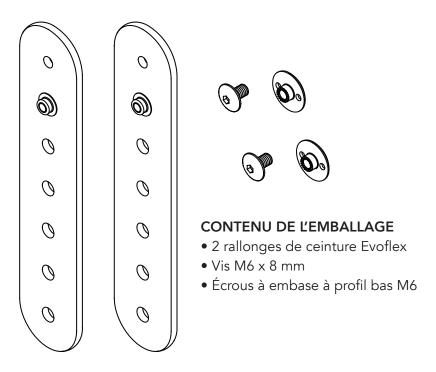

Ces consignes fournissent des informations importantes quant à la sécurité et l'entretien de toutes les rallonges de ceinture Bodypoint Evoflex. Remettre ces consignes à l'utilisateur ou à son soignant et les passer en revue avec eux pour vérifier qu'elles sont bien comprises.

Des matériels de montage à sangles Bodypoint facultatifs peuvent être employés pour le montage sur les fauteuils roulants et des systèmes de sièges.

Ce produit est destiné au montage de ceintures et de harnais de positionnement. Il n'est PAS destiné à être utilisé en tant que dispositif de sécurité de transport.

Garantie: Ce dispositif est assorti d'une garantie limitée à vie contre les défauts d'exécution ou de fabrication dans le cadre d'utilisation normale par le consommateur initial. Contacter le fournisseur ou Bodypoint pour faire valoir la garantie.

Pour plus d'information sur ce produit ou d'autres produits Bodypoint, ou pour consulter la liste des distributeurs en dehors des États-Unis, rendez-vous sur www. bodypoint.com.










558 First Ave. S., Suite 300 | Seattle, WA 98104 | 206.405.4555 | 800.547.5716 | www.bodypoint.com

OPTIONS DE FIXATION (achetées séparément)

Les rallonges de ceinture peuvent être fixées au fauteuil roulant au moyen de colliers de serrage à bande (réf. HW320), de colliers de serrage pour cadre (réf. HW310), de support de montage pour siège (réf. HW200), ou de fixations à fente en T (réf. HKA6 & HKA10).

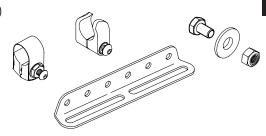

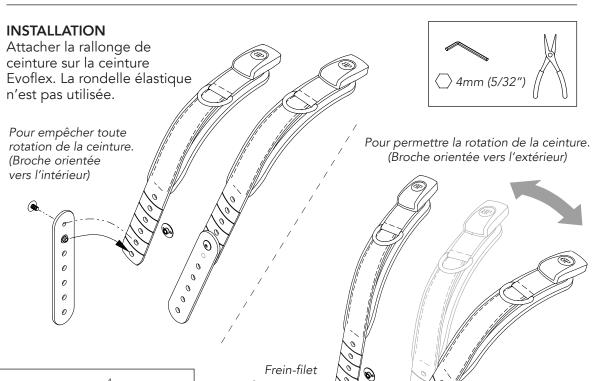


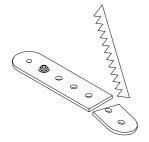


Couper à la longueur requise à l'aide d'une scie. S'assurer que l'endroit de la coupe est aussi éloigné que possible de l'orifice de montage utilisé.

MONTAGE


Attacher la rallonge de ceinture avec la ceinture Evoflex sur le fauteuil roulant. Se reporter aux instructions relatives au produit Evoflex pour plus de détails. (Rondelle élastique en option)

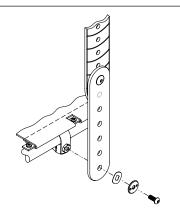

Collier de serrage à bande ou collier de serrage pour cadre

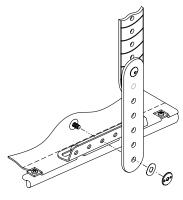

Support de montage pour siège

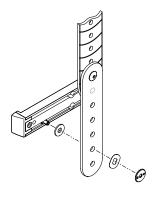

Fixations à fente en T