

DECHARGE DU COCCYX ET DES ISCHIIONS
GESTION DES AMPLITUDES DE HANCHES ASYMÉTRIQUES

VICAIR 02

Cuvette ischiatique – 2 compartiments :

Possibilités de positionnement supplémentaires pour une meilleure décharge des ischiions et du coccyx.

Soutien des trochanters :


Compartiments surélevés et plus fermes pour un transfert d'appui au niveau des trochanters diminuant d'autant les pressions exercées sur les ischiions. Stabilité latérale renforcée.

Compartiments avant :

Permettent l'alignement des jambes et la stabilité. Ajustables pour un positionnement personnalisé.

Fermeture zip :

Autour du coussin permet l'accès à tous les compartiments séparés pour un réglage du positionnement même le patient en place. Située à mi-Longueur elle accentue l'effet d'immersion par son effet contenant.

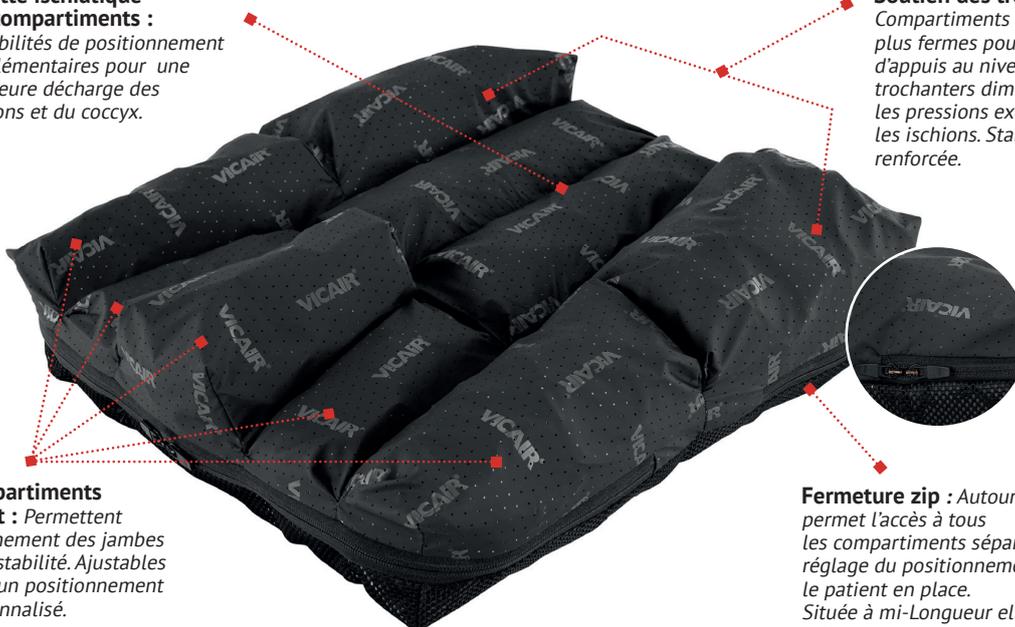

Le Vector 02 s'adapte parfaitement aux contours anatomiques du patient, lui offrant une grande stabilité et lui permettant ainsi une mobilité optimale du haut du corps. Il est confortable et totalement modulable pour soulager les zones à risques et soutenir les points d'appui en fonction des besoins du patient.

- **excellente stabilité** du bassin grâce au support latéral des cuisses.
- **immersion optimale** bonne redistribution des pressions.
- **convient aux asymétries.**
- **prévention des escarres :** possibilité de décharger les zones à risque.
- **Léger**, ne se dégonfle pas.

PERFORMANCES PRODUIT	
PROTECTION CUTANÉE PRÉVENTION D'ESCARRE	● ● ● ● ●
Redistribution des pressions	● ● ● ● ●
Réduction des forces de cisaillement	● ● ● ● ○
Contrôle du microclimat	● ● ● ● ●
Réductions des impacts et vibrations	● ● ● ● ●
POSITIONNEMENT	● ● ● ● ●
Stabilité latérale	● ● ● ● ●
Stabilité avant-arrière	● ● ● ● ●
Prévention des glissements	● ● ● ● ●
Ajustements manuels	● ● ● ● ●
Facilité de transferts	● ● ● ● ○
MAINTENANCE ET SÉCURITÉ	● ● ● ● ●
Durabilité	● ● ● ● ●
Fiabilité (ne se dégonfle pas)	● ● ● ● ●
Fonctionnement quand mal utilisé	● ● ● ● ○
Peu de maintenance	● ● ● ● ●
Niveau d'hygiène	● ● ● ● ●
FONCTIONNEMENT ET MISE EN PLACE	● ● ● ● ●
Confort	● ● ● ● ●
Légèreté	● ● ● ● ●
Tailles disponibles	● ● ● ● ●
Poids d'utilisateur maximum	● ● ● ● ●
Auto ajustements	● ● ● ● ○

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Épaisseur	6 et 10 cm
Poids moyen	500 g - 850 g
Poids maxi utilisateur	250 kg
Lavable en machine	60°C

TAILLES DES COUSSINS	
	STANDARD tailles > 53 cm en 10 cm uniquement
	SUR DEVIS

